

670125048 NORSK BRUKSANVISNING

H2+ 6in1 Hydrogen PLUS multi-apparat



HYDROGEN PLUS er en innovativ enhet som kombinerer seks elementer i ett, som utfyller hverandre og gir en spektakulær behandlingseffekt:

RADIOBØLGER (RF)

Et hode som sender ut radiobølger genererer varme i huden og underhuden. Kollagen varmes opp, noe som fører til krymping og sterk spenning -samt fornyelse av strukturen. Resultatet er en forbedring i ansiktet, som reduksjon av rynker og oppstramming av huden.

ULTRALYD

Detet er en veldig effektiv måte å introdusere aktive stoffer fra kosmetikk i huden. Under påvirkning av varme utvider blodårene seg, slik at tilførselen av celler med blod, oksygen og næringsstoffer øker.

HYDROBRASJON

Den nyeste teknologien for eksfoliering av død hud med et spesialdesignet hode. Effekten av behandlingen er glatt, dypt fuktet og strålende hud.

COLD HEAD

Denne er designet for å berolige irritert hud, lukke aquapores etter elektroporering eller aktive ingredienser i pleieprodukter

OXYGEN SPRAY

Saltvann brukes det til å rense huden, mens bruken av en ampulle avhenger av dens sammensetning vil ha effekt på huden, f.eks. fuktighetsgivende, oksyngivende, regenererende ...

CAVITATION PEELING

Dette er en metode for å rense døde celler i stratum corneum i huden.

Teknisk informasjon

Spennning: 230V

Ultralyd frekvens: 1Mhz

Radio bølgefrequens: 2Mhz, bipolar

Sugekraft: 65cmHg

Vannstrøm: 30L

Press: 90Kpa

Effekt: 160W

Bruksanvisning

- Åpne esken og sjekk at alle deler er inkludert og i god stand. Ta vare på den originale pakken for mulige service-forekomster.
- Plasser enheten i et rent og godt ventilert område med en temperatur mellom 5oC og 40oC. Den relative luftfuktigheten kan ikke være større enn 80 %. Sørg for at ingen gjenstander er plassert innenfor en avstand på 5 cm rundt enheten.
- Ikke plasser noen gjenstander oppå enheten.
- Plasser fremre og bakre flasker riktig. For å trekke ut de bakre, skru dem ut. For de fremre trykker du bare på den øvre knappen, så kan de enkelt fjernes.
- Plugg strømledningen inn i stikkkontakten og slå på enheten.
- Rengjør flaskene før du fyller dem med skjønnhetsprodukter. Når du trekker ut flaskene for tømning og rengjøring etter en behandling, sørg for at enheten ikke er i drift, ellers kan produktet komme inn i huset til enheten og forårsake skade på komponentene.
- Hvis du hører en summelyd når enheten er i drift, sjekk monitorindikatoren på avfallsflasken. Hvis indikatorlampen blinker, tøm flaskene og plasser dem riktig igjen.

Fyll flaskene med følgende produkter:

A: Dyprensevæske/middel

B: Fuktighetsgivende væske

C: Desinfiserende løsning

D: Oksygenholdig væske (H2 O2 bakre flaske)

HYDRODERMABRASJON

Indikert for dyp rengjøring og for behandlinger for å fjerne svarte flekker, akne, smuss fra huden og for fet hud. Det er også indisert sammen med fettreduksjonsbehandlinger og for å øke hudens elastisitet og tone.

1. Plugg kablet inn i "Abrasion"-sidekontakten. Plasser den slik at "Open" forblir på den øvre delen av kablet.
2. Rengjør pasientens ansikt før behandling.
3. Stikk det tilsvarende hodet inn i håndtaket, avhengig av området som skal behandles.
4. Avhengig av produktet som skal brukes, dreier du sentrale hjulet for å velge flaske. For eksempel, hvis en oksygenholdig behandling skal brukes, velg bokstaven D.
5. Mellom behandlingene med forskjellige produkter, trykk og hold i 4-5 sekunder hodet på håndtaket to ganger med fingeren for å rengjøre det.
6. Bytt hode og juster sugeintensiteten avhengig av pasientens hud og området som skal behandles.
7. Trykk på "H2 O2" eller "Dermabrasion"-knappen på skjermen avhengig av behandlingen som skal utføres. Vent 3 minutter før du begynner å sprøyte. Denne funksjonen kan også velges fra håndtakets knapp.
8. Etter behandling, rengjør flaskene ABCD og rørene for å unngå blokkering.

ULTRALYD

1. Plugg kablet inn i "Ultralyd"-sidekontakten. Plasser den slik at "Open" forblir på den øvre delen av kablet.
2. Rengjør pasientens ansikt før behandling og påfør litt gel på området som skal behandles.
3. Velg behandlingstid, juster intensiteten fra 1 til 10 med pilene og velg type bølge ved hjelp av "MODE"-knappene: kontinuerlig bølge (venstre knapp) og pulserende bølge (høyre knapp). Det anbefales å bruke den første til behandlinger på normal hud og tykkere vevsområder. Den andre er imidlertid ideell for sensitiv hud og mykt vev. Det anbefales å starte med den kontinuerlige bølgen og gradvis øke intensiteten.
4. Trykk på "Ultralyd"-knappen på skjermen for å starte behandlingen.
5. Flytt håndtaket ved å trykke forsiktig på huden fra bunn til topp langs konturlinjene i 5-8 minutter.

COLD HEAD /HAMMER

Indikert etter hudforyngelsesbehandlinger, for å redusere størrelsen på porene, for å fjerne rødhet, for å redusere hudfølelse og for å forbedre hudtonen.

1. Plugg kabelen inn i "Cold" sidekontakten. Plasser den slik at "Open" forblir på den øvre delen av kabelen.
2. Rengjør pasientens ansikt før behandling og påfør litt gel på området som skal behandles.
3. Trykk på "Kald"-knappen på skjermen.
4. Plasser hammeren på pasientens områder som skal behandles.

RADIOFREKVENNS

1. Plugg kabelen inn i "RF"-sidekontakten. Plasser den slik at "Open" forblir på den øvre delen av kabelen.
2. Rengjør pasientens ansikt før behandling og påfør litt gel på området som skal behandles.
3. Velg behandlingstid, juster intensiteten fra 1 til 10 med pilene og velg type bølge ved hjelp av "MODE"-knappene: kontinuerlig bølge (venstre knapp) og pulserende bølge (høyre knapp). Det anbefales å bruke den første for behandlinger på normal hud og tykkere vev. Den andre er imidlertid ideell for sensitiv hud og mykt vev. Det anbefales å starte med den kontinuerlige bølgen og gradvis øke intensiteten.
4. Trykk på "RF"-knappen på skjermen for å starte behandlingen.
5. Flytt håndtaket ved å trykke forsiktig på huden fra bunn til topp eller lag små sirkler på hele ansiktsflaten.
6. Operasjonen bør ikke vare mer enn 10-15 minutter.

SPRAY

1. Plugg kabelen inn i "Spray"-sidekontakten. Plasser den slik at "Open" forblir på den øvre delen av kabelen.
2. Rengjør pasientens ansikt før behandling.
3. Fyll lotionen som skal sprøytes i den lille plastbeholderen som er tilpasset sprøyterøret.
4. Trykk på "Spray"-knappen på skjermen.
5. Pek røret mot området som skal behandles og begynn å spraye lotionen.
6. Hvis munnstykket på et tidspunkt er blokkert, rens bort alt oppsamlet avfall med en nål eller et lite verktøy.

PEELING ULTRASONISK


Eliminerer døde hudceller, fjerner overskudd av neglebånd og forbedrer hudens tekstur.

MODUS A: Scrubber

1. Plugg kabelen inn i "Scrubber"-sidekontakten. Plasser den slik at "Open" forblir på den øvre delen av kabelen.
2. Rengjør og tørk godt pasientens ansikt før behandling. Påfør et eksfolierende produkt på området som skal behandles.
3. Velg behandlingstid, juster intensiteten fra 1 til 10 med pilene og velg type bølge ved hjelp av "MODE"-knappene: kontinuerlig bølge (venstre knapp) og pulserende bølge (høyre knapp). Det anbefales å bruke den første til behandlinger på normal hud og tykkere vevsområder. Den andre er imidlertid ideell for sensitiv hud og mykt vev. Det anbefales å starte med den kontinuerlige bølgen og gradvis øke intensiteten.
4. Trykk og hold nede de to sideknappene på skrubbersonden samtidig og vipp den 45° som vist på bildet nedenfor.
5. Behandlingstiden er rundt 15-20 minutter.

MODUS B: Galvanisk

1. Plugg kabelen inn i "Scrubber"-sidekontakten. Plasser den slik at "Open" forblir på den øvre delen av kabelen.
2. Rengjør og tørk godt pasientens ansikt før behandling. Påfør riktig lotion for den galvaniske funksjonen på området som skal behandles.
3. Velg behandlingstid, juster intensiteten fra 1 til 10 med pilene og velg type bølge ved hjelp av "MODE"-knappene: kontinuerlig bølge (venstre knapp) og pulserende bølge (høyre knapp). Det anbefales å starte med den kontinuerlige bølgen og gradvis øke intensiteten.
4. Trykk og hold nede de to sideknappene på skrubbersonden samtidig, trykk den fast på huden og gli den jevnt over ansiktslinjer, som vist på bildet ovenfor.

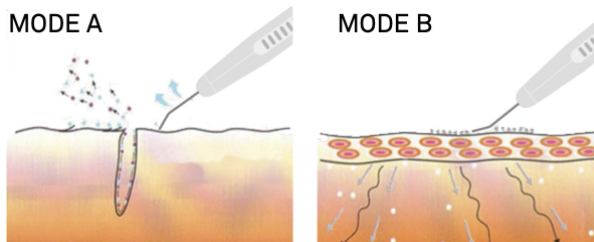

Advarsler

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)

Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.

Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid

Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.

Apparatet er beregnet for profesjonelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)



Kontraindikasjoner

Ikke bruk enheten med:

- Pasienter med overfølsom hud eller alvorlig akne.
- Pasienter med diabetes, høyt blodtrykk eller høyt kolesterol.
- Pasienter med smittsomme hudinfeksjoner.
- Pasienter med pacemakere, implanterbar kardioverter-defibrillator (ICD), eller andre elektriske eller rytmiske hjerteregulerende enheter.

FORSIKTIG

- Innen 24 timer etter mottatt behandling anbefales det å bruke solkrem. Rådfør deg med kosmetologen din om hvilke kosmetiske produkter som kan brukes på huden din.
- Pasienter som lider av anafylaksi, alvorlig akne, hypersensitiv hud eller blodsirkulasjonsproblemer bør konsultere en lege før du bruker denne enheten.
- Hvis pasienten merker noe ubehag under behandlingen, stopp den umiddelbart.

Vedlikehold

Ikke rengjør enheten når den er slått på. Bruk en ren, tørr klut til å rengjøre enheten (du kan bruke en lett fuktig klut for å fjerne gjenstridig smuss eller flekker).

For å rengjøre hydrodermabrasjonshåndtaket, start med flaske C og velg maksimal sugeintensitet. Trykk "Start" og hold en finger på hodet i 5-10 sekunder. Fjern hodet og gjenta bevegelsen 8-10 ganger. Når flaske C er ren og tom, fyll flaskene A og B med varmt vann og gjenta den samme handlingen for å forhindre blokkering av rør og håndtak. Trekk deretter ut hodet og rengjør det med en klut for å fjerne all form for smuss. Du kan også bløtlegge hodene i alkohol eller desinfiserende løsning i et minutt. For å rengjøre sprøyterøret, fyll rørbeholderen med varmt vann, trykk på "Start" og spray alt det varme vannet som finnes inni.

Bruk en fuktig klut til å rengjøre de andre sondene og håndtakene etter hver bruk.



Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.



Dette produktet oppfyller følgende krav

1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC